




Протокол сверления



Сверление прямым сверлом

Ø Диаметр	Средней твёрдости кость II и III типов
Ø 3.3	2.0
	2.8
Ø 3.75	2.0
	2.8
	3.2
Ø 4.2	2.0
	2.8
	3.2
	3.65
Ø 5.0	2.0
	2.8
	3.2
	3.65
	4.1
	4.5

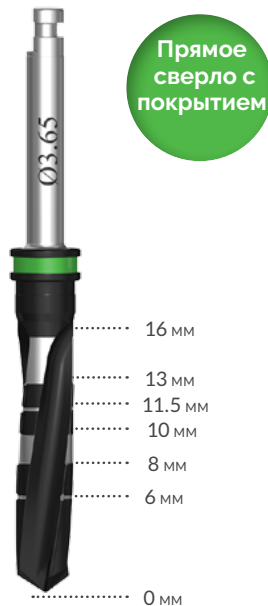



Протокол сверления



Сверление прямым сверлом

Ø Диаметр	Средней твёрдости кость II и III типов	Твёрдая кость I типа
Ø 3.3	2.0	2.0
	2.8	2.8
	3.2	3.2
		3.65 Кортикальная кость
Ø 3.75	2.0	2.0
	2.8	2.8
	3.2	3.2
		3.65 Кортикальная кость
Ø 4.2	2.0	2.0
	2.8	2.8
	3.2	3.2
	3.65	3.65
Ø 5.0		4.1 Кортикальная кость
	2.0	2.0
	2.8	2.8
	3.2	3.2
	3.65	3.65
	4.1	4.1
Ø 6.0	4.5	4.5
		4.8 Кортикальная кость
	2.0	2.0
	2.8	2.8
	3.2	3.2
	3.65	3.65
	4.1	4.1
	4.8	4.8
	5.2	5.2
		5.8 Кортикальная кость

Кортикальная кость - сверлите кортикальную пластинку.



Прямое
сверло с
покрытием